



LYMPHOLOGIE

Catalogue

VARISAN® FLAT

VARISAN® CIRCULAIRE



**SCIENCE & MEDICAL
QUALITY**



Configuration du tricotage circulaire



Salle de tissage circulaire



Dynamomètre pour le contrôle de la compression


Une histoire de qualité

La société CIZETA MEDICALI S.p.A. est issue d'une longue tradition de production d'articles de contention en tissu élastique destinés à la prévention et au traitement des pathologies.

C'est en 1872 qu'est fondée à Milan la société Centenari & Zinelli, la plus ancienne entreprise italienne productrice de tissus élastiques à être cotée à la bourse de Milan.

En 1936 est produit le premier bas élastique pour le traitement des veines variqueuses, et bientôt la société Centenari & Zinelli se spécialise dans ce type de produits dont elle devient le premier fabricant en Italie.

Aujourd'hui la mission de l'entreprise est de rechercher constamment de nouvelles solutions de thérapie pour l'insuffisance veino-lymphatique et le traitement des problèmes lymphatiques, à travers des produits innovants, certifiés par des instituts internationaux reconnus et s'appuyant sur une prestigieuse tradition d'entreprise.

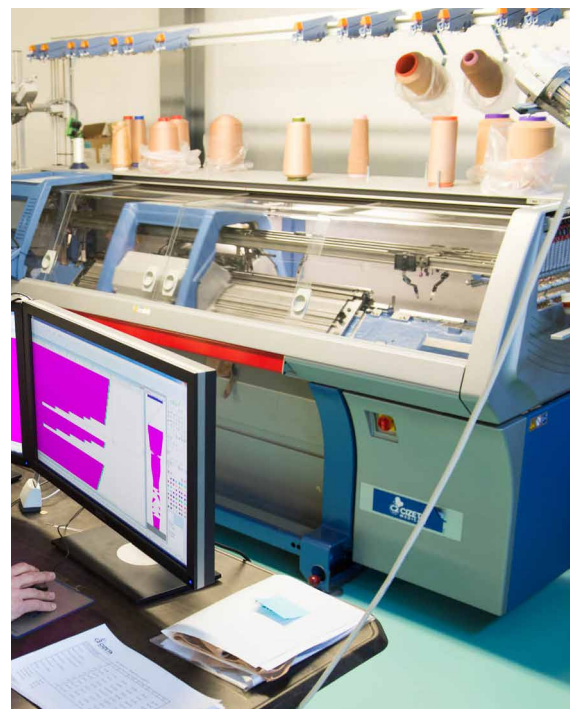

Métier rectiligne pour la production de bas médicaux de compression à tricotage rectiligne

Comment les dispositifs de compression agissent-ils ?

Les dispositifs augmentent la pression sur la peau, en superficie et en profondeur, et bloquent par conséquent le développement de l'œdème en favorisant sa résorption.

Quelles caractéristiques un bon dispositif de compression doit-il présenter ?

Sur un lymphœdème, le dispositif de compression doit avoir une bonne rigidité pour reproduire le plus fidèlement possible les caractéristiques du bandage multicouche à allongement court. Il doit donc appliquer une pression de travail élevée, exercée lorsque le membre portant la « compression » est en mouvement, et une faible pression de repos, exercée lorsque le membre est immobile. Les gaines de compression à « tricotage rectiligne » sont dotées de ces caractéristiques physiques.

VARISAN[®] FLAT



Caractéristiques

La ligne VARISAN[®] FLAT, certifiée Asqual est disponible sur-mesure en :

- Classe II (15 à 20 mmHg)
- Classe III (20 à 36 mmHg)
- Classe III Forte (20 à 36 mmHg - indice de rigidité plus élevé)
- Classe IV (> 36 mmHg)

Indications

Cette typologie de tricotage rectiligne est spécifiquement dédiée au traitement des pathologies lymphatiques.

- Lymphœdèmes primaires et secondaires aux différents stades cliniques de l'évolution
- Œdèmes post-traumatiques et post-chirurgicaux
- Phlébolympheœdèmes
- Lymphœdèmes des chéloïdes suite à des interventions chirurgicales

Contre-indications

Les dermohypodermes aiguës, les infections cutanées, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une allergie connue au contact avec des composants.

Durée du traitement

Pour un traitement efficace, suivre les recommandations de port des prescripteurs. Le bas doit être enfilé le matin, de préférence avant que le patient ne se lève.

Il est recommandé de marcher le plus possible pendant la journée.

Classes de compression disponibles	
Classe	Compression en mmHg
II	15 - 20
III	20 - 36
III Forte	20 - 36
IV	> 36



Beige



Composition

- Polyamide : 70%
- Elasthane : 30%




VARISAN® FLAT

Membre supérieur

DISPOSITIFS Membre supérieur		CLASSES DE COMPRESSION			
ARTICLE	RÉF.	Cl 2	Cl 3	Cl 3 Forte	Cl 4
		15 - 20 mmHg	20 - 36 mmHg	20 - 36 mmHg	> 36 mmHg
Gant avec arrêt au métacarpe (CA)		•	•	•	
Mitaine (CZ)		•	•	•	
Manchon autofixant avec arrêt au poignet (GC)		•	•	•	
Manchon autofixant avec arrêt au métacarpe (GC)		•	•	•	
Manchon avec gant autofixant (GC)		•	•	•	

OPTIONS	
Couleur : beige 	
 Manchon couvre épaule	 Bord supérieur oblique
 Manchon autofixant	 Bord supérieur droit
 Coude fléchi	 Bande de maintien H 35 mm
 Coude droit	 Bande de maintien H 50 mm
 Coude confort	

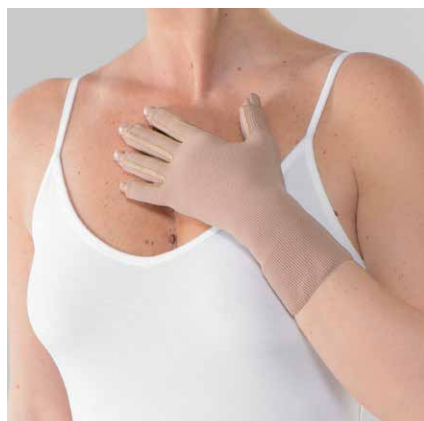

Mitaine (CZ)



Manchon autofixant
avec arrêt au métacarpe (GC)



Bande de maintien H 35 mm

VARISAN[®] FLAT

Membre inférieur

DISPOSITIFS Membre inférieur		CLASSES DE COMPRESSION			
ARTICLE	RÉF.	Cl 2	Cl 3	Cl 3 Forte	Cl 4
		15 - 20 mmHg	20 - 36 mmHg	20 - 36 mmHg	> 36 mmHg
Mi-bas (AD)	 pied ouvert	•	•	•	•
Bas autofixe (AG)	 pied ouvert	•	•	•	•
Collant (AT)	 pied ouvert	•	•	•	•
Hémicollant (AGTR - AGTL)	 pied ouvert	•	•	•	•
Hémicollant - Panty (AT)	 pied ouvert	•	•	•	•
Panti (boxer FT)		•	•	•	•
Couvre-pied 4 orteils		•	•	•	
Couvre-pied 5 orteils		•	•	•	

OPTIONS	
Couleur : beige 	
 Pied oblique	 Genou droit
 Pied droit	 Bande de maintien AG silicone H 35 mm
 Pied ouvert	 Bande de maintien AG silicone H 50 mm
 Pied fermé	 Cuisse oblique
 Talon droit	 Cuisse droite
 Talon profond	 Ceinture élastique
 Mi-bas avec fermeture éclair latérale	 Ceinture réglable
 Genou fléchi	 Culotte homme
 Genou confort	 Culotte avec gousset respirant



Cuisse oblique -
Bande de maintien AG 50 mm



Hémicollant (AGTR - AGTL)



Collant (AT)

Localisation des points pour la prise de mesures. Membres supérieurs

Procéder à la localisation des points en faisant asseoir le patient avec le membre supérieur étendu sur une surface rigide, la paume de la main tournée vers le haut et le coude en légère flexion (environ 30°). Les mesures doivent être prises au centre du membre supérieur.




Point A
Circonférence à la base des doigts (point de référence : tête du cinquième métacarpe)




Point B
Circonférence à la base du pouce




Point C
Circonférence au pli palmaire du poignet

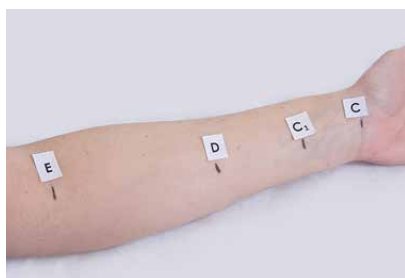


Point D
Circonférence à mi-distance entre le point C et le point E

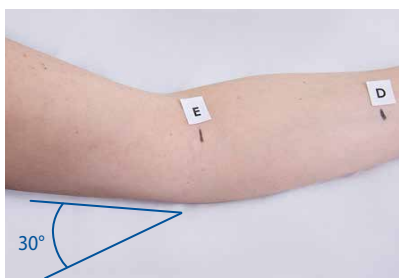

Point E
Circonférence du coude fléchi à environ 30°

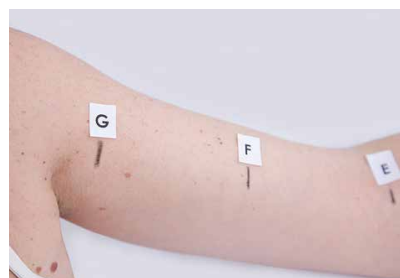

Point F
Circonférence à mi-distance entre le point E et le point G

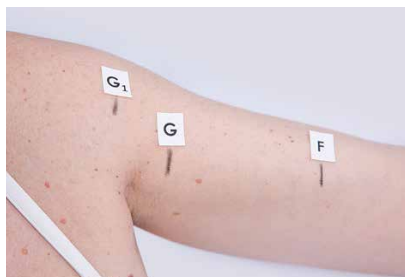

Point G
Circonférence à 2 ou 3 cm de l'aisselle



Point G1
Patient en position assise avec le membre supérieur le long du corps. Environ 2 cm au dessus du point G



Point H
Environ 12 à 15 cm au-dessus du point G, au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Mesurer la longueur du point G jusqu'au point H



Bride réglable
Mesure à partir du point H avec le mètre positionné comme indiqué

Localisation des points pour la prise de mesures. **La main**

Patient assis avec le membre supérieur étendu sur une surface rigide.
Membre étendu avec la paume de la main tournée vers le haut.




Point A
Circonférence à la base des doigts (point de référence : tête du cinquième métacarpe)



Point B
Circonférence à la base du pouce



Point C
Circonférence au pli palmaire du poignet

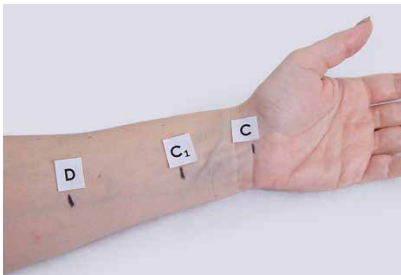

Point C1
Circonférence à environ 5 cm du point C



Point X
Circonférence à la base du doigt



Point Z
Circonférence à la projection de l'ongle sur la surface de la paume

La longueur de chacun des doigts doit être mesurée de leur base jusqu'à la projection de la base de l'ongle sur la surface de la paume.




On procède à la localisation des points A à F sur le patient étendu sur la table d'examen.
Le pied doit être maintenu dans une position à 90°.
Les mesures doivent être prises sur la partie externe du membre inférieur.



Point A : base des doigts
Circonférence à la base des doigts




Point Y : talon
Circonférence du bord du talon
au cou de pied

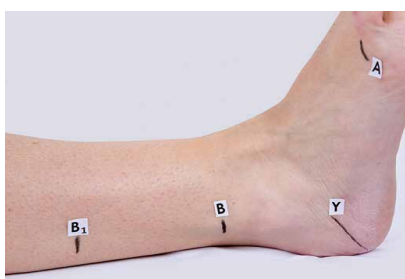


Point B1
Circonférence au point de transition
entre le muscle et le tendon du triceps




Point C
Circonférence du point le plus
volumineux du triceps

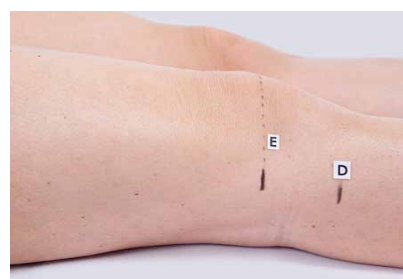

Point D : tête du péroné
Circonférence au niveau
de la tête du péroné

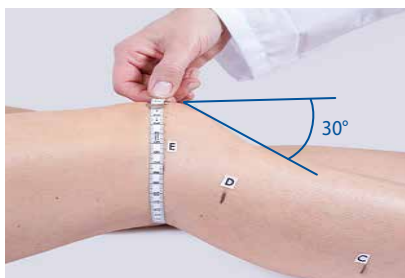

Point E
Circonférence du genou, au milieu de la
rotule, avec le genou fléchi à 30°

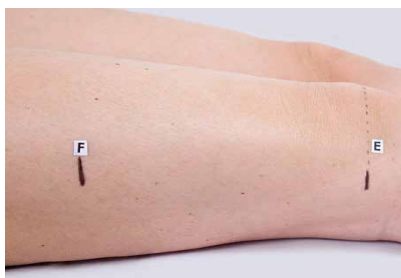

Point F
Circonférence à mi-distance entre le
point E et le point G

Patient en position debout



Point G
Circonférence du point le plus volumineux de la cuisse, 2 à 3 cm sous le pli fessier



Indiquer la longueur entre le sol et le point G



Point K
Circonférence à l'aîne



Point H
Circonférence au niveau du point le plus volumineux des hanches



Mesure de la longueur entre les points A et H



Point K1
Il est antérieur et se situe à environ 2 cm au-dessus du point K



Point K2
Il se situe sous le pli fessier



Point T : taille
Circonférence au niveau du tour de taille



Mesure entre les points K1 et T (antérieur)



Mesure de la longueur entre les points K2 et T (postérieur)

VARISAN® CIRCULAIRE



DISPOSITIFS Membre inférieur	
ARTICLE	RÉF.
Mi-bas (AD) option pied ouvert	
Bas autofixe (AF ou AG) option pied ouvert	
Collant (AT) option pied ouvert	

DISPOSITIFS Membre supérieur	
Manchon autofixant avec arrêt au poignet (GC) option couvre épaule	
Manchon autofixant avec arrêt au métacarpe (GC) option couvre épaule	

Classes de compression disponibles	
Classe	Compression en mmHg
II	15 - 20
III	20 - 36



Beige



Noir



Caractéristiques

La ligne VARISAN® CIRCULAIRE, certifiée Asqual, est disponible sur-mesure en :

- Classe II (15 à 20 mmHg)
- Classe III (20 à 36 mmHg)

Indications

- Maladie veineuse chronique aux stades CEAP C2 à C5
- Lymphœdèmes primaires et secondaires de stade I et II débutant
- Œdèmes post-traumatiques et post-chirurgicaux

Contre-indications

Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, dermohypodermes aiguës, infections cutanées, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg), neuropathie périphérique évoluée, intolérance aux fibres utilisées.



Composition

- Polyamide : 70%
- Elasthanne : 30%

la délivrance
du sur-mesure

+ facile
+ rapide



VARISAN SMAPP®

L'application sur-mesure au service des applicateurs



- 1 **Saisie des mesures en ligne** : réduction du nombre d'erreurs de saisie des mesures, et des oublis de mesures grâce à l'interface ergonomique
- 2 **Calcul du tarif LPPR automatique**
- 3 **Prix forfaitaire fabricant** pour calcul du prix de vente en temps réel
- 4 **Suivi de la commande en ligne** après mise en fabrication en un clic
- 5 **Délais raccourcis**
- 6 **Historique patient** avec renouvellement facile, suivi de l'évolution morphologique

Le sur-mesure circulaire en 5 jours seulement

Service disponible en tricotage **circulaire**
pour le mi-bas, bas et collant.

Demandez gratuitement votre identifiant
et mot de passe :

02 48 96 87 93

Délai sur-mesure habituel : prise de mesure + devis fabricant
+ devis LPPR + acceptation patient + fabrication + livraison
= 10 jours*

>> **Délai avec SMAPP** : 5 jours + suivi du patient



CIZETA MEDICALI FRANCE
109, rue de la Brasserie - 18200 ST AMAND MONTROND
Tél : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr